

# PRONTO

## INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

### Pronto Sleep

Pronto Sleep é um inalador de vapor único que dilata suavemente o nariz e libera uma mistura suave de quatro óleos essenciais puros, tradicionalmente conhecidos, para ajudar você a relaxar e a dormir melhor naturalmente.

Se você tiver dificuldade para dormir e permanecer dormindo, Pronto Sleep pode ser o ideal para você.

Se os sintomas persistirem, converse com seu profissional de saúde.

### Pronto Clear

Pronto Clear é um inalador de vapor único que dilata suavemente o nariz e proporciona uma mistura suave de seis óleos essenciais

puros, tradicionalmente conhecidos, por limpar naturalmente um nariz entupido.

Se você tiver dificuldade para respirar pelo nariz devido a congestão, alergia, desvio de septo ou vias aéreas estreitas, Pronto Clear pode ser o ideal para você.

Se os sintomas persistirem, converse com seu profissional de saúde.

### Inalador de vapor nasal recarregável

Pronto é um inalador de vapor nasal recarregável. Ele vem com um estojo especialmente projetado para acondicionamento e recarga.



## INSTRUÇÕES

### Carregando Pronto pela primeira vez

No primeiro uso, você precisará carregar Pronto com a mistura de óleos essenciais da seguinte forma:


1. Lave as mãos antes de retirar o produto da embalagem.

2. Abra a Unidade de Recarga do Pronto e remova a tampa.

3. Coloque o inalador de vapor Pronto na sua posição de carga, como mostrado. Empurre suavemente o dispositivo para garantir que ele fique bem firme na posição de carga com o difusor de aroma tocando o ponto de carga. Deixe de 30 segundos a dois minutos.

4. Retire o inalador de vapor e cubra imediatamente o ponto de recarga com a tampa.

5. Insira o inalador de vapor do Pronto em seu nariz seguindo as instruções de ajuste e de uso apresentadas na próxima página.

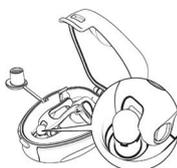

Pronto é projetado para ser recarregado até 10 vezes, com duração de até 8 horas por carga. Se você deixar o ponto de recarga descoberto por qualquer período de tempo, o número de recargas diminuirá.

### Montagem e uso do Pronto

1. Segure o difusor de aroma entre o seu dedo indicador e o polegar, com os anéis voltados para você e as pás voltadas para o lado contrário.

2. Com delicadeza, coloque os anéis primeiro e incline o difusor para cima, até o topo do nariz, ao inseri-lo. O dispositivo foi projetado para seguir o ângulo natural dentro do nariz.

3. O Pronto deve ficar colocado inteiramente dentro do nariz, com apenas o difusor de aroma à mostra e cruzando a ponta das narinas. Se o Pronto ficar pendurado, ele pode ser muito grande para o seu nariz.

4. **AJUSTE:** Se o Pronto ficar solto ou se você desejar um fluxo de ar maior, expanda suavemente os anéis, clicando suavemente nas pás para fora.

Se durante o ajuste o pino sair completamente, volte a inseri-lo suavemente para recriar o anel.

### Limpeza do Pronto

Depois de usar Pronto, você deve lavar a parte que vai dentro do nariz com água morna e sabão, tomando o cuidado de não submergir ou molhar o difusor de aroma. É recomendado

usar um pequeno recipiente preenchido até a metade com água morna e sabão.

1. Proteja o difusor de aroma, cobrindo-o com o dedo indicador e o polegar.

2. Segure o Pronto de cabeça para baixo e mergulhe os anéis na solução com sabão e gire-o várias vezes.

3. Esvazie o recipiente e o encha com água fresca, e repita os passos 1 e 2 para enxaguar o Pronto.

4. Seque bem o Pronto, prestando atenção especial aos anéis e pinos de ajuste, antes de colocá-lo novamente na unidade de armazenamento na posição de não recarga. O ponto de recarga deve permanecer fechado até que você vá usar o Pronto novamente.

5. Lave as mãos caso algum óleo essencial tenha ficado em seus dedos.



### Recarregando Pronto

Após o uso, limpe o Pronto e coloque-o na unidade de acondicionamento, na posição de não carga. Pouco antes de usá-lo:

1. Destampe o ponto de recarga e coloque o Pronto na posição de recarga. Empurre suavemente o dispositivo para garantir que ele fique bem firme na posição de carga com o difusor de aroma tocando o ponto de carga.

2. Deixe recarregando de 30 segundos a 2 minutos;

3. Insira o Pronto em seu nariz e recoloca imediatamente a tampa no ponto de recarga.



### Materiais e Óleos

El inhalador de vapor Pronto está hecho de O inalador de vapor Pronto é fabricado com polímeros de grau médico e o inalador de vapor e a unidade de recarga não são fabricados com látex de borracha natural.

As misturas de óleo Pronto contêm 100% de óleos essenciais puros, sendo que:

1. **Pronto Sleep** contém Lavanda, Eucalipto, Valeriana e Árvore do Chá.

2. **Pronto Clear** contém Hortelã-pimenta, Mentol, Limão, Eucalipto, Árvore do Chá e Alecrim.

**Se você tem alergia ou sensibilidade a óleos essenciais, não use Pronto ou interrompa o uso se ocorrer reação.**

**Não use Pronto durante a gravidez.**

## ⚠️ ATENÇÃO

- Utilize Pronto apenas como indicado.
- Não use se a embalagem estiver quebrada.
- Pronto é apenas para uso pessoal e não deve ser compartilhado com outras pessoas.
- Como Pronto contém óleos essenciais, não deve ser utilizado durante a gravidez.
- Pronto não deve ser utilizado para a administração de qualquer outra mistura de óleo, líquido ou medicamento.
- Pronto só é adequado para ser colocado no nariz.
- Não fume nem utilize um isqueiro a gás enquanto segura ou usa Pronto.
- Tenha cuidado ao dilatar as pás e não as dilate para além do comprimento do pino.
- Pronto não é adequado para crianças menores de 12 anos.
- Não use o dispositivo se este estiver danificado de alguma forma.
- Não parta intencionalmente o difusor para usar só metade do dilatador.
- Não desmonte intencionalmente a unidade de recarga.
- Não adicione outros líquidos ou óleos ao difusor ou ao ponto de recarga.
- Se ocorrer irritação, interrompa o uso e consulte o seu médico.
- Não use durante a prática de esportes de contato, esportes aquáticos ou enquanto estiver nadando.
- Mantenha fora do alcance das crianças, contém peças pequenas.
- Pronto foi projetado para fornecer 10 cargas com duração de até 8 horas.
- O perfume irá diminuir na sua intensidade ao longo do período de 8 horas. Ar condicionado e aquecimento podem afetar a intensidade do aroma durante o período de 8 horas.
- O tempo de recarga do seu dilatador nasal Pronto demora entre 30 segundos e dois minutos. As cargas iniciais levarão menos tempo e as cargas mais próximas do final da vida útil de Pronto podem demorar até dois minutos.
- Não use se o difusor Pronto ficar solto.
- Não use se o ponto de recarga Pronto estiver em falta ou se estiver solto.
- Não use se o óleo da unidade de recarga estiver vazando.
- Evite a exposição prolongada à luz solar direta e ao calor.
- Quando o Pronto deixar de carregar, elimine a unidade de recarga e o dilatador nasal na caixa de resíduos normal.
- A embalagem de Pronto é reciclável.

## Resolução de problemas e perguntas frequentes

**Como o Pronto funciona?** Pronto combina as vantagens de um dilatador nasal, para dilatar o nariz e melhorar o fluxo de ar, com a capacidade de fornecer os vapores das misturas de óleos essenciais puros, tradicionalmente reconhecidos, como benéficos para o sono ou para limpar o nariz entupido.

### Quantas cargas eu receberei com o Pronto?

Pronto poderá ser recarregado no mínimo 10 vezes. Você só pode usar Pronto por até 8 horas.

### Quanto tempo demora para fazer a recarga do Pronto?

Pronto levará de 30 segundos a dois minutos para ser carregado totalmente, dependendo do número de recargas restantes. O difusor deve parecer saturado quando estiver totalmente carregado.

### Por que eu preciso recolocar a tampa no ponto de recarga toda vez que eu recarregar o Pronto?

Recolocando a tampa no ponto de recarga, você garante as 10 recargas do seu Pronto.

### Eu não estou recebendo as 10 recargas com o Pronto?

O uso incorreto da unidade de recarga, especificamente quando você deixa de colocar a tampa do ponto de recarga, reduzirá o número de recargas que você alcançará.

### Por que eu não posso molhar o difusor?

O difusor é fabricado com um material poroso projetado para conter a carga de óleo. Molhar o material afetará a recarga do Pronto.

### Como sei se tenho o tamanho certo?

Pronto deve ficar colocado inteiramente dentro do nariz, com apenas o difusor de aroma à mostra e cruzando a ponta das narinas. Se o Pronto ficar pendurado, ele pode ser muito grande para o seu nariz. Alternativamente, se o Pronto estiver caindo, talvez seja necessário ajustar os anéis para aumentá-los ou experimentar um tamanho maior.

### O que acontece se eu ficar com irritação?

Se ocorrer irritação provocada pelos óleos ou pelo dilatador, pare de utilizar o Pronto imediatamente.

### Do que o Pronto é fabricado?

O Pronto é fabricado a partir de polímeros de grau médico ultrassuave e não é fabricado com látex de borracha natural.

### E se meu nariz parecer seco ou desconfortável?

Além de manter-se hidratado, o aumento do fluxo de ar pode fazer com que o revestimento nasal se sinta seco. Os produtos para alívio do nariz seco, tal como o Nozoil, podem combater esses efeitos. Eles vêm em sprays ou géis e, geralmente, contêm três formas de vitamina E misturadas com óleo de semente de gergelim para ajudar a proteger o tecido nasal contra os efeitos de secagem do ar inalado e ajudar a reduzir os efeitos da inflamação. Mais informações podem ser encontradas em <https://tinyurl.com/y2l3f6hh>

### E se o aroma for fraco demais para mim?

Pronto foi desenvolvido para fornecer uma intensidade específica de óleos essenciais para garantir que você obtenha o melhor resultado. Testamos a intensidade do aroma em um teste de usuário para determinar o nível preferido pela maioria das pessoas. Nós sempre agradecemos o seu feedback, por isso, forneça-nos o seu feedback sobre a intensidade do Pronto para [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

### E se o aroma for fraco demais para mim?

Pronto foi desenvolvido para fornecer uma intensidade específica de óleos essenciais para garantir que você obtenha o melhor resultado. Testamos a intensidade do aroma em um teste de usuário para determinar o nível preferido pela maioria das pessoas no teste. Nós sempre agradecemos o seu feedback, por isso, forneça-nos o seu feedback sobre a intensidade do Pronto para [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

### E se o aroma não durar a noite toda?

Nós selecionamos cuidadosamente materiais proprietários para fornecer 8 horas de liberação de aroma. O aroma diminuirá em sua intensidade ao longo do período de 8 horas. O ar condicionado e o aquecimento também podem afetar a intensidade do aroma durante o período de 8 horas. Por exemplo, o aquecimento central pode fazer com que o difusor evapore mais rapidamente do que sob condições normais de temperatura ambiente.

### Como sei se a unidade de recarga acabou?

Use um lenço de papel e coloque-o suavemente sobre o ponto de recarga. Se o tecido permanecer seco, a unidade de recarga terá terminado. Se você vir um pequeno ponto de óleo se formando, a unidade ainda pode recarregar o seu Pronto.

**Pronto é reciclável?** A embalagem de Pronto é reciclável, inclusive a embalagem externa e a bandeja interna do blister.

**Caso qualquer incidente grave ocorra com o Pronto, comunique-o imediatamente à Rhinomed Limited em [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).**

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para saber detalhes de atendimento ao cliente regional, visite: [prontorange.com/contact-us](https://prontorange.com/contact-us)

## PATENT PENDING

Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as trademarks of Rhinomed Limited. Pronto is designed in Australia. Made in China.



Rhinomed Limited  
L1, 132 Gwynne St, Richmond  
VIC 3121 Australia