

PRONTO

商品情報および取扱説明書

Pronto Sleep

プロントスリープは独自の蒸気吸入器で、鼻孔をやさしく開いて、リラックス効果があり、自然によりよく眠れる作用が知られる、鎮痛効果のある4種類の天然エッセンシャルオイルのブレンドを拡散します。

寝つきが悪かったり、よく眠れなかったりする場合には、プロントスリープの使用が効果的のかもしれませんが。

症状が持続する場合には、医療従事者の診察を受けてください。

Pronto Clear

プロントクリアは独自の蒸気吸入器で、鼻孔をやさしく開いて、自然に鼻詰まりを解消す

る効果が知られる、6種類の天然エッセンシャルオイルのブレンドを拡散します。

鼻詰まり、アレルギー、鼻中隔湾曲症や気道狭窄のために鼻からの呼吸に問題がある場合には、プロントクリアの使用が効果的のかもしれませんが。

症状が持続する場合には、医療従事者の診察を受けてください。

リチャージ可能な経鼻蒸気吸入器

プロントはリチャージ可能な経鼻蒸気吸入器で、専用に設計された保管容器とリチャージ装置が同梱されます。



使用方法

プロントの初回のチャージ

開封後、以下のようにプロントにエッセンシャルオイル・ブレンドをチャージする必要があります。

1. パッケージから製品を取り出す前に手を洗います。
2. プロントのリチャージ装置を開け、キャップを取り外します。
3. 図のように、プロントの蒸気吸入器をチャージポジションに置きます。吸入器をそっと押し込んで、ディフューザーがチャージポイントに触れた状態でしっかりとチャージポジションに据わるようにします。30秒から2分間、そのままにします。
4. 蒸気吸入器を取り外し、すぐにリチャージポイントにキャップをします。
5. 次のページの装着・調節法にしたがい、プロント蒸気吸入器を鼻孔に挿入します。



プロントのリチャージ

プロントの使用後、洗浄してから非チャージポジションで保管容器に入れます。再使用の直前に以下を行います。


1. リチャージポイントのキャップを外し、プロントをリチャージポジションに置きます。そっと押し込んで、ディフューザーがチャージポイントに触れた状態でしっかりとチャージポジションに据わるようにします。
2. 30秒から2分、チャージします。
3. プロントを鼻孔に挿入してすぐに、リチャージポイントのキャップを外します。

プロントは10回チャージ分で、1回当たり8時間持続するように設計されています。長い時

間、リチャージポイントにキャップをしないままでおくと、リチャージ可能な回数が少なくなります。

プロントの装着

1. ループを顔に向け、パドルを顔と反対の方向に向けて、ディフューザーを親指と人差し指の間で挟みます。
2. まずループをそっと入れ、ディフューザーを鼻の上部に向かって傾けて挿入します。プロントは鼻孔の自然な角度に沿うように設計されています。
3. プロントは鼻の中に納まり、ディフューザーのみが鼻の先から出ている状態になります。プロントが鼻からはみ出す場合には、サイズが大きすぎる可能性があります。
4. 調節：プロントが緩い、もっと空気の通りをよくしたい場合には、パドルを外側にそっと押すと簡単にループを広げることができます。

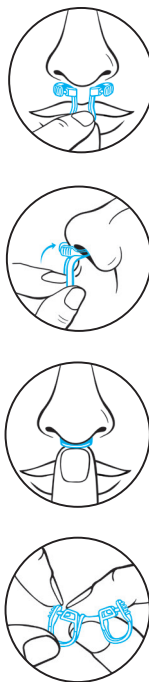

調節の途中でピンが完全に飛び出してしまった場合には、そっと戻し入れて、ループを作り直してください。

プロントの洗浄

プロントの使用後には、ディフューザーを水に浸したり、濡らしたりしないようにしながら、鼻の内部に入るプロントの部品を温かい石鹸水で洗浄する必要があります。温かい石鹸水を半分入れた小さな容器を使用することをお奨めします。

1. 親指と人差し指でカバーすることで、ディフューザーを保護します。
2. プロントを逆さまに持って、ループを石鹸

水に浸し、何度か振り洗います。

3. 容器を空にして、清潔な水を入れ、1と2を繰り返してプロントをすすぎます。
4. ループと調節ピンに特に注意しながら、プロントを十分に乾かした後、保管容器に非リチャージポジションで置きます。リチャージポイントはプロントを再び使用する準備ができるまで、キャップをしたままにしておきます。
5. エッセンシャルオイルが指に着いた場合には、手を洗ってください。



材料とオイル

プロント蒸気吸入器には医療グレードのポリマーが使われ、蒸気吸入器とリチャージ装置には天然ゴムラテックスは使用されていません。

プロントオイルブレンドには、以下のような100%天然のエッセンシャルオイルが含まれます。

1. プロントスリープには、ラベンダー、ユーカリプタス、バレリアンおよびティーツリーが含まれます。
2. プロントクリアには、ペパーミント、メントール、レモン、ユーカリプタス、ティーツリーおよびローズマリーが含まれます。

アレルギーをお持ちの場合、またはエッセンシャルオイルに対してアレルギーまたは過敏症がある場合には、プロントの使用をお控えください。異常が発生した場合には、使用を中止してください。

妊娠中はプロントの使用をお控えください。

⚠ 注意

- ・プロントを取扱説明書にしたがってのみ、使用してください。
- ・パッケージが破損している場合には、使用しないでください。
- ・プロントは個人使用に限り、ほかの人と共有しないでください。
- ・プロントにはエッセンシャルオイルが含まれるため、妊娠中には使用をお控えください。
- ・プロントをその他のオイルのブレンドや液体、薬品の吸引に使用しないでください。
- ・プロントは鼻にのみ使用してください。
- ・プロントを手を持っていたり、装着したりしている際には、喫煙またはガスライターの使用はお避けください。
- ・パドルを広げるときはゆっくりと行い、ピン長さ以上に広げないでください。
- ・プロントは12歳未満の子供の使用には適していません。
- ・装置が損傷している場合には決して使用しないでください。
- ・ディフューザーを故意に破壊し、鼻孔拡張器の半分だけを使用することはしないでください。
- ・リチャージ装置を故意に分解しないでください。
- ・ディフューザーまたはリチャージポイントにその他の液体やオイルを加えないでください。
- ・異常が現れた場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ・コンタクト・スポーツやウォーター・スポーツ、水泳をする際には使用しないでください。
- ・小さい部品が含まれるため、子供の手の届かないところに保管してください。
- ・プロントは10回チャージ分で、1回当たり8時間持続するように設計されています。
- ・8時間の間に香りの強さは弱くなります。空調や暖房の影響で、香りの強さが8時間を超えて持続する場合があります。
- ・プロントの鼻孔拡張器のリチャージ時間は30秒から2分間です。最初の数回のチャージは最短時間で済み、プロントの製品寿命の終わりが近づくとチャージには最長2分間かかる場合があります。
- ・プロントのディフューザーが緩くなった場合には使用しないでください。
- ・プロントのリチャージポイントがなくなったり、緩くなった場合には使用しないでください。
- ・リチャージ装置からオイルが漏れている場合には、使用しないでください。
- ・直射日光や熱に長時間さらさないでください。
- ・プロントがチャージできなくなった場合には、リチャージ装置と鼻孔拡張器を一般ごみ用のごみ箱に捨ててください。
- ・プロントの包装資材はリサイクル可能です。

トラブルシューティングとFAQ

プロントはどのように機能しますか？

プロントは、鼻孔を開いて空気の流れを改善する鼻孔拡張器と、睡眠の質を高めたり、鼻詰まりを解消させたりすることが知られている天然エッセンシャルオイル・ブレンドの蒸気の拡散器を兼ね備えたものです。

プロントは何回チャージできますか？

プロントは最低10回チャージできます。プロントの装着時間は最長8時間です。

プロントのリチャージ時間は？

プロントを完全にリチャージするには、残りのリチャージの回数に応じて、30秒から2分間かかります。完全にチャージされると、ディフューザーは浸透した状態になります。

プロントをリチャージするたびに、リチャージポイントのキャップを取り外す必要があるのはなぜですか？

リチャージポイントのキャップを取り外すことで、プロントの10回分のリチャージを確実にすることができます。

プロントを10回リチャージできませんでしたが、どうしてでしょうか？

リチャージ装置の使用が正しくない場合、特にリチャージポイントのキャップを開けたままにすると、リチャージ回数が少なくなります。

ディフューザーを濡らしてはいけないのはなぜですか？

ディフューザーはエッセンシャルオイルを保つように設計された多孔材料で作られています。材料が濡れると、プロントのリチャージに影響を及ぼします。

どうしたら適切なサイズを知ることが出来ますか？

プロントは鼻の中に納まり、ディフューザーのみが鼻の先から出ている状態になります。プロントが鼻からはみ出す場合には、サイズが大きすぎる可能性があります。反対に、プロントが落ちてくる場合には、ループを大きく広げるように調節するか、より大きなサイズをお試しいただく必要がある可能性があります。

異常が生じた場合はどうすればよいですか？

オイルまたは拡張器による炎症が生じた場合には、直ちにプロントの使用を中止してください。

プロントの原材料は何ですか？

プロントは医療グレードの極軟ポリマーで作られ、天然ラバーテックスは使用されていません。

鼻が乾燥したり、不快感が生じたりした場合にはどうすればよいですか？

潤いを与えられることは別で、空気の通りがよくなることで、鼻が乾燥するように感じられる場合があります。そのような症状には、Nozoiなどの乾燥性鼻炎用鎮痛剤が効果的な場合があります。スプレーまたはジェル状で、通常は3種類のビタミンEとごま油が配合され、吸入空気の乾燥作用から鼻腔組織を保護し、炎症の影響を軽減する効果があります。詳細については、<https://tinyurl.com/y2l3f6hh>をご参照ください。

香りが弱すぎる場合には？

プロントは最高の結果を確実に得るため、エッセンシャルオイルを特定の強さで提供するように設計されています。香りの強さをユーザー試験でテストし、大半の人々に好まれる香りの強さを決定しています。プロントの香りの強さに関するフィードバックをfeedback@rhinomed.globalまでお寄せください。

香りが強すぎる場合には？

プロントは最高の結果を確実に得るため、エッセンシャルオイルを特定の強さで提供するように設計されています。香りの強さをユーザー試験でテストし、大半の人々に好まれる香りの強さを決定しています。プロントの香りの強さに関するフィードバックをfeedback@rhinomed.globalまでお寄せください。

香りが一晩中持続しないのはなぜですか？

香りを8時間持続させるように、適切な材料を慎重に選定しています。香りは8時間かけて徐々に薄くなっていきます。空調や暖房の影響で、香りの強さが8時間を超えて持続する場合があります。たとえば、セントラルヒーティングを使った環境では、ディフューザーが通常の室温環境よりも速く蒸散する可能性があります。

リチャージ装置の残りがなくなったことはどのようにわかりますか？

ティッシュペーパーをリチャージポイントの上にそっと載せます。ティッシュペーパーが乾いたままなら、リチャージ装置の残りはありません。小さなオイルの点にじんできると、まだリチャージすることが可能です。

プロントはリサイクルできますか？

プロントの包装資材は外装および内側のブリスタートレイともリサイクル可能です。

プロントのご使用中に重大な事故が発生した場合には、[RhinoMed Limited \(feedback@rhinomed.global\)](mailto:feedback@rhinomed.global) まで直ちにご報告ください。

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight

カスタマーサービス

各地域のカスタマーサービスについては、prontorange.com/contact-us をご参照ください。

PATENT PENDING

Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as trademarks of RhinoMed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.



RhinoMed Limited
L1, 132 Gwynne St. Richmond
VIC 3121 Australia