

# PRONTO

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Pronto Sleep

Pronto Sleep – это уникальный паровой ингалятор, который мягко снимает заложенность носа благодаря успокаивающей смеси из четырех эфирных масел, традиционно известных как средства, помогающие расслабиться и способствующие лучшему сну.

Если у Вас есть проблемы с засыпанием и сном, тогда Pronto Sleep создан для Вас. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.


### Pronto Clear

Pronto Clear – это уникальный паровой ингалятор, который мягко снимает заложенность носа благодаря смеси из

шести эфирных масел, традиционно известных как природные средства, очищающие заложенный нос естественным путем. Если Вы испытываете проблемы с дыханием через нос вследствие заложенности, аллергии, искривления носовой перегородки или узких дыхательных путей, то Pronto Clear может Вам помочь. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

### Паровой ингалятор с возможностью перезарядки

Pronto – это паровой ингалятор с возможностью перезарядки. Он поставляется со специально разработанным чехлом для хранения и зарядки.

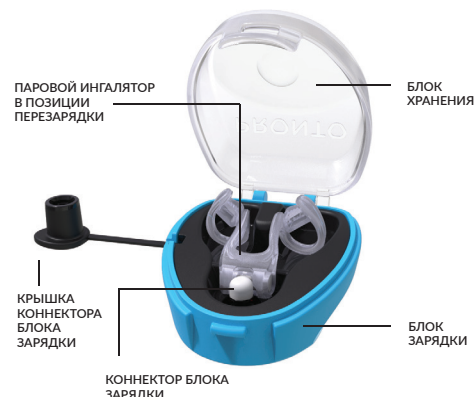

## ИНСТРУКЦИЯ

### Зарядка Pronto в первый раз

При первом использовании Вам необходимо зарядить Pronto смесью эфирных масел следующим образом:

1. Вымойте руки перед тем, как вынуть продукт из упаковки.
2. Откройте блок зарядки Pronto и удалите крышку.
3. Установите паровой ингалятор Pronto в положение зарядки, как показано на рисунке. Аккуратно надавите на устройство, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено в положении зарядки и диффузор касается точки зарядки. Оставьте на время от 30 секунд до двух минут.
4. Снимите паровой ингалятор и сразу же закройте коннектор блока зарядки крышкой.



5. Вставьте паровой ингалятор Pronto в нос, следуя инструкциям на следующей странице.

### Перезарядка Pronto

После использования очистите Pronto и поместите в блок хранения в положение без зарядки. Перед следующим использованием:

1. Снимите крышку с коннектора блока зарядки и установите Pronto в положение зарядки. Аккуратно надавите на устройство, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено в положении зарядки, при этом диффузор касается точки зарядки.
2. Оставьте на время от 30 секунд до двух минут.



3. Вставьте паровой ингалятор Pronto в нос и сразу же замените крышку коннектора блока зарядки.

Pronto рассчитан на 10 зарядок. Продолжительность работы составляет до 8 часов. Если Вы оставите коннектор блока зарядки открытым на какое-то время, то количество возможных зарядок уменьшится.

### Как надевать и носить Pronto

1. Зажмите диффузор между указательным и большим пальцами так, чтобы петли были обращены к Вам, а лопасти были направлены от Вас.
2. Осторожно поместите петли в нос, поднимая диффузор вверх к кончику носа. Устройство было разработано так, чтобы следовать естественному углу наклона носового прохода.
3. Pronto должен полностью находиться внутри носа, а диффузор плотно прилегать к перемычке между ноздрями. Если Pronto провисает, значит, он Вам велик.
4. **ОТРЕГУЛИРУЙТЕ:** если устройство слишком большое для Вашего носа или Вы чувствуете дискомфорт во время его использования, расширьте петли, осторожно нажимая на лопасти.




Если во время регулировки штифт полностью выпал, осторожно вставьте его на место, чтобы воссоздать петлю.

### Чистка Pronto

После использования Pronto необходимо вымыть теплой водой с мылом ту часть,

которая находилась внутри носа, стараясь не намочить диффузор. Рекомендуется использовать небольшой контейнер, наполовину наполненный теплой водой с мылом.

1. Защитите диффузор, накрыв его указательным и большим пальцами.
2. Удерживая Pronto в перевернутом состоянии, окуните петли в мыльный раствор и несколько раз проведите из стороны в сторону.
3. Наполните контейнер чистой водой и повторите шаги 1 и 2, чтобы промыть Pronto.
4. Прежде чем поместить устройство в незаряжаемое состояние обратно в коробку для хранения, хорошо высушите его, обращая особое внимание на петли и регулировочные штифты. Коннектор блока зарядки должен оставаться закрытым до следующего использования Pronto.
5. Тщательно вымойте руки в случае попадания эфирных масел на кожу.

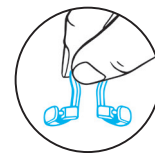

### Материалы и масла

Паровой ингалятор Pronto изготовлен из медицинских полимеров. В состав ингалятора и блока зарядки не входит латекс натурального каучука.

Масляные смеси Pronto содержат 100% чистые эфирные масла, в том числе:

1. Pronto Sleep содержит лаванду, эвкалипт, валериану и чайное дерево.
2. В состав Pronto Clear входят мята, ментол, лимон, эвкалипт, чайное дерево и розмарин.

**Если у Вас есть аллергия или чувствительность к эфирным маслам, не используйте Pronto или прекратите использование, в случае возникновения реакции на масла.**

**Не используйте Pronto во время беременности.**

## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Используйте Pronto только в соответствии с инструкцией.
- Не используйте, если упаковка повреждена.
- Pronto предназначен только для личного использования и не должен передаваться другим лицам.
- Так как Pronto содержит эфирные масла, его не следует использовать во время беременности.
- Pronto не следует использовать совместно с любыми другими масляными смесями, жидкостями или лекарствами.
- Pronto подходит только для использования в носу.
- Не курите и не пользуйтесь газовой зажигалкой, когда держите или используете Pronto.
- Будьте осторожны при расширении лопастей, а также не растягивайте их в длину.
- Pronto не подходит для детей младше 12 лет.
- Не используйте устройство, если оно повреждено каким-либо образом.
- Не ломайте диффузор и не используйте только одну половину расширителя.
- Не разбирайте блок зарядки.
- Не добавляйте масла или другие жидкости в диффузор или на коннектор блока зарядки.
- Если возникает раздражение, прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте во время занятий контактными и водными видами спорта, а также во время плавания.
- Храните в недоступном для детей месте, так как устройство содержит мелкие детали.
- Pronto рассчитан на 10 зарядок. Продолжительность работы составляет до 8 часов.
- Интенсивность аромата будет уменьшаться в течение 8 часов. Кондиционер и отопление могут влиять на интенсивность запаха.
- Время зарядки носового расширителя Pronto занимает от 30 секунд до двух минут. В начале использования Pronto зарядка занимает наименьшее количество времени, а ближе к концу срока службы может занять до двух минут.
- Не используйте, если диффузор Pronto стал Вам велик.
- Не используйте, если коннектор блока зарядки Pronto был утерян или ненадёжно закрепляется на устройстве.
- Не используйте, если из блока зарядки вытекает масло.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и тепла.
- Когда срок службы Pronto истек и устройство больше не заряжается,

выбросите блок зарядки и носовой расширитель в обычное мусорное ведро.

- Упаковка Pronto пригодна для вторичной переработки.

## Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы

**Как работает Pronto?** Pronto сочетает в себе преимущества дилататора, открывающего нос и улучшающего воздушный поток, со способностью доставлять пары чистых эфирных масел, которые традиционно известны как средства, улучшающие сон и помогающие при заложенности носа.

**Сколько раз я могу зарядить Pronto?** Pronto рассчитан на минимум 10 зарядок. Продолжительность работы составляет до 8 часов.

**Сколько времени требуется для зарядки?** Для полной зарядки Pronto потребуется от 30 секунд до двух минут, в зависимости от количества оставшихся зарядок. Диффузор должен выглядеть полным при полной зарядке.

**Почему мне нужно менять крышку коннектора блока зарядки каждый раз, когда я перезаряжаю Pronto?** Заменяя крышку коннектора блока зарядки, Вы обеспечите возможность зарядить Pronto 10 раз.

**Почему у меня не получилось зарядить Pronto 10 раз?** Неправильное использование блока зарядки, в частности, если не закрывать крышку коннектора блока зарядки, приводит к уменьшению количества зарядок.

**Почему нельзя мочить диффузор?** Диффузор изготовлен из пористого материала, предназначенного для удержания масла. Если намочить материал, то это повлияет на качество зарядки Pronto.

**Как я узнаю, что выбрал правильный размер?** Pronto должен полностью находиться внутри носа, а диффузор плотно прилегать к перемычке между ноздрями. Если Pronto провисает, значит, он Вам велик. И наоборот, если устройство выпадает, то Вам необходимо отрегулировать петлю, чтобы увеличить их размер или приобрести устройство большего размера.

**Что делать, если я получаю раздражение?** В случае раздражения любого вида немедленно прекратите использование Pronto.

**Из чего сделан Pronto?** Pronto изготовлен из ультрамягких полимеров медицинского назначения и не содержит натуральный латекс.

**Что делать, если я чувствую сухость или дискомфорт в носу?** Даже при соблюдении водного баланса, увеличенный поток воздуха может вызвать ощущение сухости слизистой оболочки носа. Средства для облегчения ощущения сухости, такие как Nozoil, помогут устранить эту проблему. Они выпускаются в виде спреев или гелей и, как правило, содержат три формы витамина E, смешанные

с маслом кунжутного семени, чтобы помочь защитить носовую ткань от пересыхания при дыхании и уменьшить воспаление. Более подробную информацию можно найти на сайте <https://tinyurl.com/y2l3f6hh>

**Что делать, если аромат не достаточно сильный для меня?** При разработке Pronto мы протестировали насыщенность аромата в пользовательском испытании, чтобы определить уровень, предпочитаемый большинством людей. Таким образом, все устройства имеют определенную силу аромата, чтобы обеспечить наилучший результат. Мы ценим Ваше мнение, поэтому, пожалуйста, отправляйте отзывы о Pronto по адресу [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

**Что делать, если аромат слишком сильный для меня?** При разработке Pronto мы протестировали насыщенность аромата в пользовательском испытании, чтобы определить уровень, предпочитаемый большинством людей. Таким образом, все устройства имеют определенную силу аромата, чтобы обеспечить наилучший результат. Мы ценим Ваше мнение, поэтому, пожалуйста, отправляйте отзывы о Pronto по адресу [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

**Что делать, если запах не остается сильным всю ночь?** Мы тщательно отобрали специальные материалы, чтобы обеспечить работу устройства в течение 8 часов. Сила аромата будет уменьшаться во время работы ингалятора. Кондиционирование воздуха и отопление могут влиять на интенсивность аромата. Например, центральное отопление может вызвать испарение масел в диффузоре быстрее, чем при нормальной комнатной температуре.

**Как я узнаю, что блок зарядки больше не работает?**

Возьмите салфетку и аккуратно положите ее на коннектор блока зарядки. Если ткань остается сухой, то блок зарядки больше не работает. Если Вы видите небольшое пятно от эфирного масла, значит, устройство работает и готово к зарядке Pronto.

**Является ли Pronto пригодным для вторичной переработки?** Упаковка Pronto подлежит вторичной переработке, включая внешнюю коробку и внутренний блистерный лоток.

**Если с Pronto произойдет какой-либо серьезный инцидент, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Rhinomed Limited по адресу [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).**

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Для получения информации о региональном отделе обслуживания клиентов, пожалуйста, зайдите на наш сайт: [prontorange.com/contact-us](http://prontorange.com/contact-us)

## PATENT PENDING

Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as trademarks of Rhinomed Limited.

Pronto is designed in Australia. Made in China.



Rhinomed Limited  
L1, 132 Gwynne St. Richmond  
VIC 3121 Australia